

FRANCY NEW

Poltrona ginecologica/urologica - Gynaecological/urological chair

Dal design elegante e confortevole con un'ampia selezione di colori per una configurazione personalizzata.

Regolazioni silenziose e fluenti delle movimentazioni della sedia.

Poltrona dotata di 4 motori elettrici a bassa tensione (24V-DC): movimentazioni elettriche e indipendenti: sollevamento, schienale, trendelenburg e poggipiedi / braccioli. Il telaio è realizzato con l'utilizzo d'acciaio di alta qualità, verniciato a polvere colore grigio chiaro con caratteristiche antimicrobiche.

La tappezzeria è realizzata con tessuto sky con proprietà antibatteriche, antimicotiche, ignifugo, disinfettabile e altamente resistente all'abrasione.

Il basamento è dotato di kit 4 ruote con un dispositivo di arresto a pedale per garantire un facile spostamento della poltrona e per permettere di sanificare l'ambiente di lavoro con estrema facilità.

La poltrona presenta un' altezza minima della seduta dal pavimento (510 mm) per consentire un comodo accesso ed evitare l'uso dello sgabello. Elevata capacità di carico: max 230 kg

Dotazione standard: vaschetta porta liquidi in acciaio inox completa di supporto dotato di braccio articolato e coppia barre laterali porta accessori montate sulla seduta.



Elegant and comfortable design with a numerous selection of colors for a personalized configuration. Silent and flowing adjustments to the movements of the chair.

Chair equipped with 4 electric motors at low voltage (24V-DC). Electric and independent movements: lifting, backrest, trendelenburg and footrest / armrests

The frame is made with the use of high quality steel, powder coated in light gray with antimicrobial characteristics. The upholstery is made of sky fabric with antibacterial, antifungal, fireproof, disinfettable and highly resistant to abrasion.

The base is equipped with 4 wheel with a pedal stop device to ensure easy movement of the chair and to allow the work environment to be sanitized with ease.

The chair has a minimum height of the seat from the floor to allow easy access and avoid the use of the stool. High load capacity: max 230 kg. Standard equipment: liquid collection bowl in stainless steel complete of support with articulated arm and pair of side bars for accessories mounted on the seat.

Ricerca del massimo comfort per il paziente: poggiatesta e braccioli regolabili elettricamente e altezza minima per consentire un comodo accesso alla sedia senza l'utilizzo del predellino anche per pazienti anziani e con protesi all'anca.

Dotata di movimentazione di trendelenburg (-21°) e reverse trendelenburg (4°) gestite elettricamente.

Con l'aggiunta dell'accessorio gambale estraibile (imbottito con sky), è possibile trasformare la poltrona in un comodo lettino in posizione orizzontale per consentire l'esecuzione dell'ecografia.



It ensures maximum comfort for the patient: electrically adjustable footrests/armrests and minimum height to allow easy access to the chair without using the step stool even for elderly patients and those who have prosthetics to the hips.

Equipped with trendelenburg (-21°) and reverse trendelenburg (4°) movements managed electrically.

With the addition of the removable leg rest accessory (upholstered with sky), it is possible to transform the chair into a comfortable bed in a horizontal position to allow the execution of the ultrasound scan.

COMFORT



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Tensione di alimentazione
Tension/Frequency
230V-50Hz

Motori bassa tensione
Low-voltage motors
24 V-DC

Capacità di sollevamento max
Lifting capacity max
230 Kg

Grado di protezione
Degree of protection
IP54

Peso della poltrona
Chair weight
135 kg


Altezza max della seduta (da terra)
Seat max height (from the ground)
960 mm

Altezza min della seduta (da terra)
Seat min height (from the ground)
510 mm



Trendelenburg : -21°

Reverse Trendelenburg: 4°

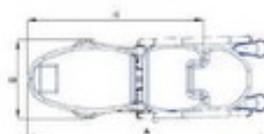

A.	1870 mm
B.	700 mm
C.	1800 mm
D.	21° mm
E.	1300 ÷ 1685 mm
F.	118° ÷ 180°
G.	510 ÷ 960 mm
H.	1420 mm

ACCESSORI_OPTIONALS



12900017
Porta carta mono uso
Paper roll holder

12500007
Poggiatesta ad altezza regolabile
Adjustable height head rest



12900018
Porta vassoio completo di vassoio
applicabile allo schienale
Tray support with tray

12500009
Batteria emergenza
Battery box



12000012
Astaportafebo 2 ganci
I.V. Stand with 2 hooks



60000001
Supporto colposcopio solidale con la seduta della poltrona
Colposcopic support integrated to chair seat



12500005/A:
Supporti reggicosce in poliuretano integrale
Pair of padded thigh-holders in Polyurethane foam

12500005/B:
Supporti reggicosce in poliuretano integrale rivestiti in sky
Pair of padded thigh-holders in Polyurethane foam upholstered with sky.

Entrambe le versioni sono regolabili e dotate di giunto snodato con dispositivo di blocco movimenti
Both versions are adjustable and provided with a jointed support that allows the block of the movements.

12900011:
Gambale estraibile rivestito in sky per ecografia
Removable Leg rest for ultrasound scan



Dotazione standard/Standard equipment

Funzione Memory Position:**permette la memorizzazione di 4 posizioni**

- 2 preimpostate dalla casa: CPR e posizione iniziale di visita (gestite da comando a pulsantiera)
- 2 posizioni di trattamento programmabili autonomamente dal medico (gestite da comando a pedale con tecnologia wireless)

Gestione movimentazioni elettriche tramite comando a pulsantiera e comando a pedale con tecnologia wireless.

**Memory Position Function:****it allows the memorization of 4 positions**

- 2 positions are preset by the firm: CPR and the initial position of the medical examination (they are managed by a push-button control)
- 2 positions are set freely by the doctor (a foot switch with wireless technology manages them)

The management of the electrical movements is organized through a foot switch with wireless technology